

## verschillende versies van de skaibekleding



### Versie 1 - standaard

Skaibekleding met klittenband bevestiging (in dit geval bij het niklas-bed) hoogteverstelling mogelijk omdat de polstering aan de spijlen op en neer glijden kan.



### Versie 2

Skaibekleding die met lussen aan het bed (in dit geval bij het niklas-bed) bevestigd zijn.



### Versie 3

Vast montageerde skaipolstering, polstering wordt op platen in het bed (in dit geval bij het knut-bed) vastgeschroefd, bedmaten worden aangepast voor optimale verstelling. Let op: deze versie is niet los leverbaar!



### Speciale versie voor verstelbaar zijhek

Skaibekleding met lussen. Polstering kan bovenop het verstelbare zijhek dubbel geslagen worden om een neerzinken van het hek te mogelijk maken (in dit geval bij het knut-bed).

## de modellen



### model tom <sup>\*1)</sup>

standaard skaipolstering  
**artikelnummer: 99.051**  
Skaikussens, 30 mm dik in blauw. Bestaande uit zes stuks kussens 500x500 mm voorzien van klittenband en zes stuk kussens 450x500 mm. Het klittenband is zelfklevend en kun dus op het lexaan geplakt worden. Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!

### model tom <sup>\*2)</sup>

skaipolstering vast geïntegreerd  
**artikelnummer: 99.051.FEST**  
De polstering, ca. 30 mm dik in blauw, en wordt op een basisplaat gemonteerd en in de bed geïntegreerd. Het bed wordt hierbij zodanig geadapteerd dat de ligvlakhoogte en de verstelling van het inlegraam mogelijk blijft! Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!



### model niklas <sup>\*3)</sup>


standaard skaipolstering  
**artikelnummer: 99.051**  
Skaikussens, 30 mm dik, blauw. Bestaande uit vier stuks kussens 980x500 mm en twee stuks kussens 885x500 mm met lussen. Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!

### model niklas <sup>\*4)</sup>

skaipolstering vast geïntegreerd  
**artikelnummer: 99.051.FEST**  
De polstering, ca. 30 mm dik, in blauw, wordt vast op een basisplaat gemonteerd en in de bed geïntegreerd. Het bed wordt hierbij zodanig geadapteerd dat de ligvlakhoogte en de verstelling van het inlegraam mogelijk blijft! Standaardhoogte is 60 cm.

- \*1) Bij een tweedelige vouwschuifdeur is het nodig de polstering van de deuren voor de opening te verwijderen ofwel tenminste voor een deel, bij lexaan bekleding kan het klittenband op het lexaan geplakt worden. Voordat het elektrisch verstelbare zijhek gebruikt wordt moeten de kussens verwijderd worden! (AUB onderzoek u of dit voor uw verzorging voldoende is!) Hierbij wijzen wij U nadrukkelijk op dat vast geïntegreerde polstering waarbij het bed zo geadapteerd wordt dat de hoogte verstelling mogelijk blijft!
- \*2) De tweedelige vouwschuifdeur wordt hierbij als vouwdeur geëffectueerd.
- \*3) Voordat de deuren opengedaan worden moet de polstering afgenomen worden ofwel na de buitenkant geklapt worden.
- \*4) De elektrisch verstelbare zijheksen worden hierbij als afklapbaar deuren geëffectueerd.
- \*5) Bij de tweedelige vouwschuifdeur is het nodig de polstering van de deuren voor de opening te verwijderen ofwel tenminste voor een deel, bij lexaan bekleding kan het klittenband op het lexaan geplakt worden. Nota bene: bij de „KNUT C“, dat in het hoofd- en voetenlement van het bed al lexaan heeft. Hier kunnen wij bij de standaard skaibekleding het hoofd- en voetenlement met spijlen bouwen (geen toeslag!).
- \*6) Bij de tweedelige vouwschuifdeur is het nodig de polstering van de deuren voor de opening te verwijderen ofwel tenminste voor een deel, bij lexaan bekleding kan het klittenband op het lexaan geplakt.

## de modellen

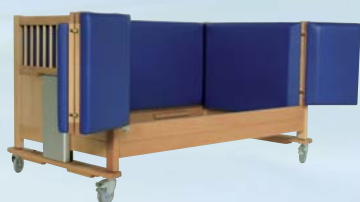

**model knut** \*5)

standaard skaipolstering  
**artikelnummer: 99.051**  
 Skaikussens, 30 mm dik, in blauw. Bestaande uit zes stuks kussens 500x500 mm met klittenband en zes stuk kussens 450x500 mm. Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!

**model knut** \*2)

skaipolstering vast geïntegreerd  
**artikelnummer: 99.051.FEST**  
 De polstering ca. 30 mm dik, in blauw, wordt vast op een basisplaat gemonteerd en in de bed geïntegreerd. Het bed wordt hierbij zodanig geadapteerd dat de ligvlakhoogte en de verstelling van het inlegraam mogelijk blijft! Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!



**model savoir vivre** \*1)

standaard skaipolstering  
**artikelnummer: 99.051**  
 Skaikussens, 30 mm dik, in blauw. Bestaande uit zes stuks kussens 500x500 mm met klittenband en zes stuk kussens 450x500 mm. Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!

**model savoir vivre** \*2)

skaipolstering vast geïntegreerd  
**artikelnummer: 99.051.FEST**  
 De polstering ca. 30 mm dik, in blauw, wordt vast op een basisplaat gemonteerd en in de bed geïntegreerd. Het bed wordt hierbij zodanig geadapteerd dat de ligvlakhoogte en de verstelling van het inlegraam mogelijk blijft! Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!






**model jonas** \*6)

standaard skaipolstering  
**artikelnummer: 99.051**  
 Skaikussens, 30 mm dik, in blauw. Bestaande uit zes stuks kussens 500x500 mm met klittenband en zes stuk kussens 450x500 mm. Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!

**model jonas** \*2)

skaipolstering vast geïntegreerd  
**artikelnummer: 99.051.FEST**  
 De polstering ca. 30 mm dik, in blauw, wordt vast op een basisplaat gemonteerd en in de bed geïntegreerd. Het bed wordt hierbij zodanig geadapteerd dat de ligvlakhoogte en de verstelling van het inlegraam mogelijk blijft! Standaardhoogte is 50 cm, ook ander hoogten zijn mogelijk!

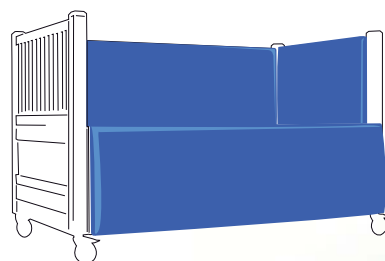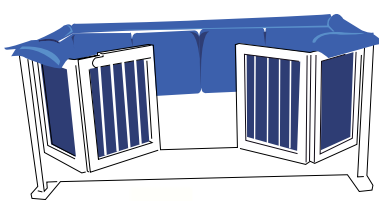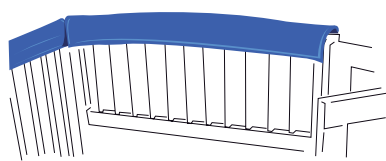

## Randenbescherming, deelpolstering of volle polstering?

SAVI biedt voor het actuele beddenprogramma een uitgebreid skaipolstering programma. Beslist u zelf welke delen van het bed gepolsterd mogen worden. Principieel is er een verschil tussen randbescherming, deelpolstering en volle polstering te onderscheiden. Nota bene: Leest u aandachtig onze gebruikershandleiding. Er staan voor u belangrijke dingen in, om optimaal gebruik te garanderen.

Voor vedere vragen staan we u graag, onder de serviceadres [info@savi.de](mailto:info@savi.de) ter beschikking.